


# Les étapes pré-analytiques à réaliser par le préleveur pour assurer la qualité des résultats d'une gazométrie sanguine

→ Toutes les étapes doivent être respectées

## Seringue héparinée:

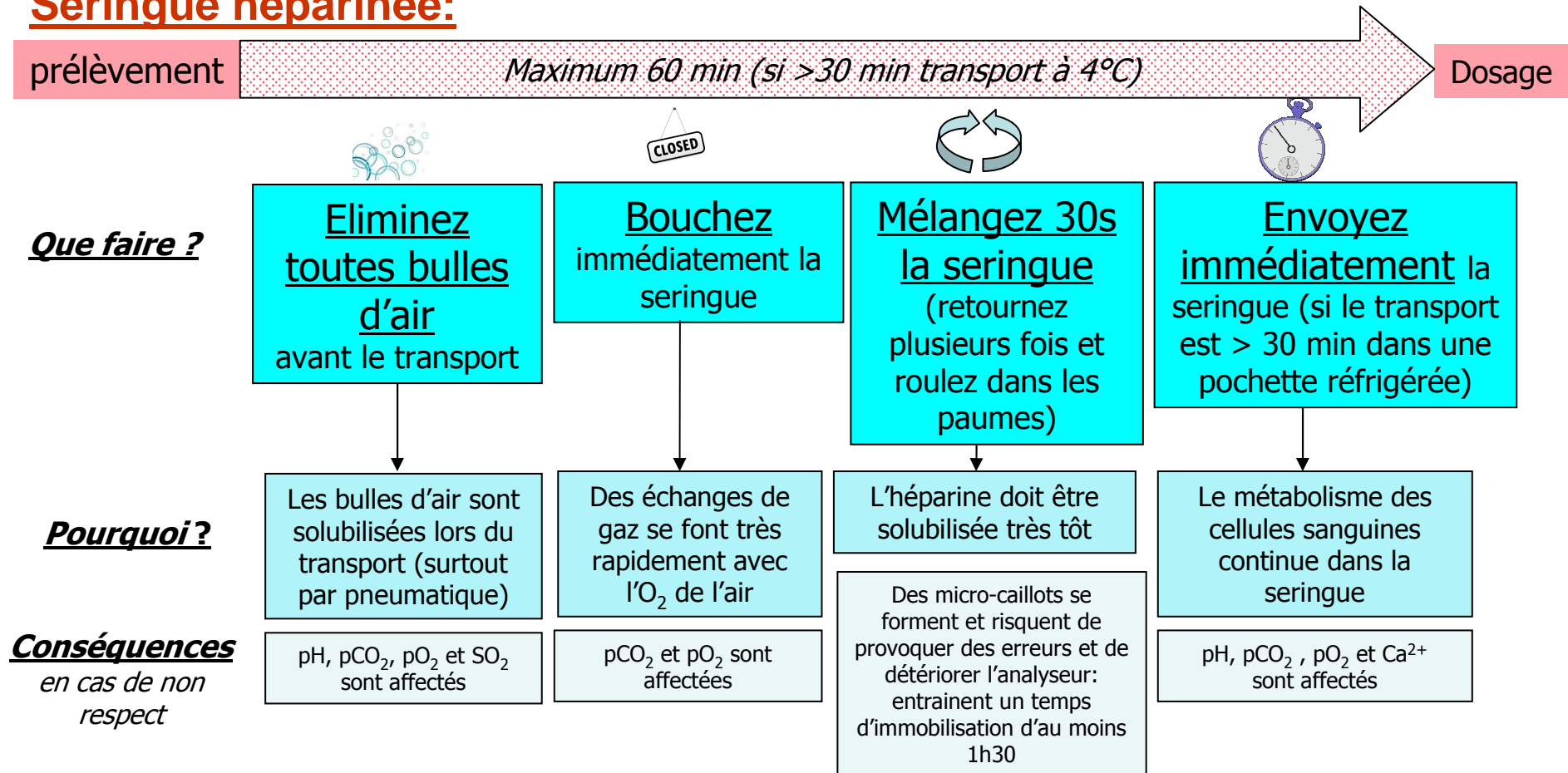

## Capillaire hépariné:

- Prélever et boucher le capillaire,
- Faire déplacer l'aimant dans le capillaire Aller/Retour au moins 5 fois, puis rouler dans les paumes des mains
- Analyser l'échantillon: l'analyse doit se faire dans les 5 min qui suivent le prélèvement.